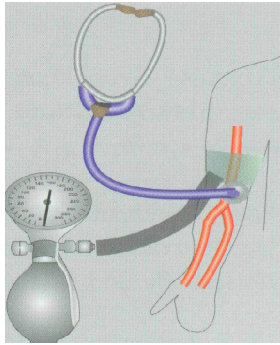
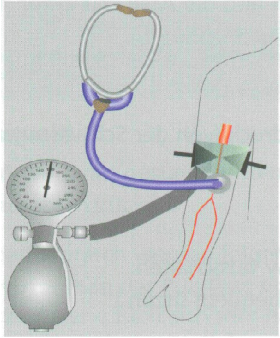
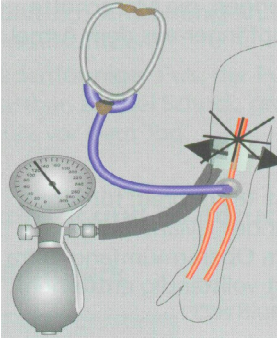
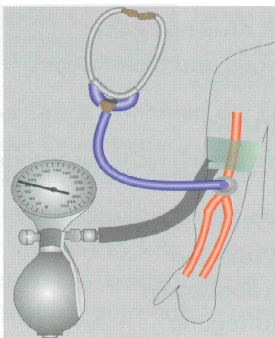


Auskultatorische Methode der Blutdruckmessung

	Ist die Arterie nicht komprimiert strömt das Blut frei hindurch. Die Blutdruckmanschette ca. 2-3cm oberhalb der Ellenbeuge luftleer und straff am Oberarm anlegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die ableitenden Schläuche nicht unmittelbar in der Ellenbeuge liegen; dies kann sonst zu störenden Geräuschen während des Messens führen.
	Es ist zu beachten, dass das Manometer 0 anzeigt und das Ventil des Blutdruckapparates geschlossen ist. Ohr-Oliven des Stethoskops locker ins Ohr stecken. Membran/Trichter des Stethoskops liegt in der Ellenbeuge, Rand des Schallempfängers unter der Manschette einklemmen und dann den Puls an A. radialis fühlen. Die Manschette mit dem Aufblasballon füllen bis der arterielle Blutdruck erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt ist kein Puls mehr tastbar. Jetzt den Manschettendruck um max. 30mmHg erhöhen.
	Durch das sehr vorsichtige Öffnen des Ventils kann Luft aus der Manschette entweichen (max. 3-5mmHg/Sek.). Nur so können genaue Werte abgelesen werden. Auf die pulssynchronen Strömungs- bzw. Klopfgemäusche (Korotkow-Gemäusche) achten. Den Druckwert am Manometer ablesen, sobald der erste „Klopftön“ hörbar ist (systolischer Wert).
	Manschette langsam weiter entleeren und beim letzten Klopftön (oder wenn die Geräusche deutlich leiser werden) den diastolischen Druck ablesen. Die restliche Luft kann nun aus der Manschette abgelassen werden. Nach Entfernen der Manschette diese mit Desinfektionsmittel abwischen.